

内蒙古自治区病理专业医疗质量控制中心
培训文档

远程会诊（医院端）
操作流程

2024年9月

远程会诊（医院端） 操作流程

1. **登录**：输入内蒙古质控中心网站 <https://nmgblzkzx.chinapathology.cn>
选择【会诊登录】，登录方式【手机号、密码】



不记得密码，可以点“忘记密码？”通过手机验证码来重设密码。

登录到
内蒙古自治区会诊平台

手机/邮箱/用户名
1111111114@qq.com

登录密码
.....

下次自动登录 [忘记密码](#)

登录

(1) 首次使用请安装 MoticDSM:

(常见问题: DSM无法安装, 可拨打技术服务热线: 0592-5696467)




A、请点击

页面左上角的 MoticDSM 下载最新版本。

B、下图表示连接正常情况。



(2) 切换到病例窗口：点击“常规病例”切换到病例窗口

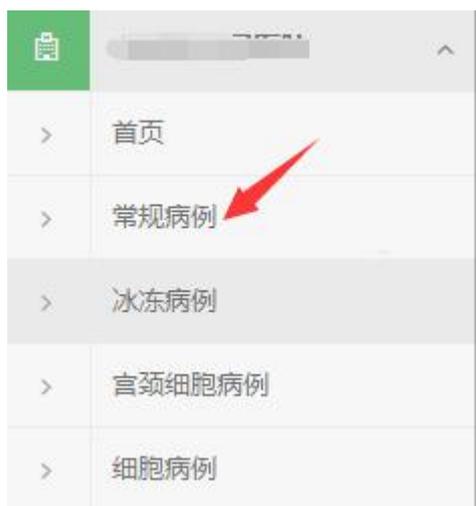

(3) 新建病例：确保网页左上角的 MoticDSM 已连接上；选择左侧“常规病例”栏目后点击右侧的“新建”按钮建立病例；



(4) 进入新建病例后，填写完如下图基本资料，如姓名、取材部位、病史等信息

(*号为必填项)。注：冰冻病例多个预约功能，其他跟常规一样。

常规病例

冰冻病例

(5) 打开切片窗口：在新建病例窗口底部，点击“增加切片”按钮，打开切片窗口。

(6) 选择上传切片：在左侧的窗口中选择需要上传的切片（在切片前打上“√”，然后点击上传按钮。

扫描切片		本地磁盘		
共有 6 条记录				
<input type="checkbox"/>	缩略图	切片名称	信数	创建时间
<input checked="" type="checkbox"/>		92W 2401	20	9/12/2011 1
<input type="checkbox"/>		100X(blood)	100	1/8/2010 23

(7) 选择专家会诊：拉到页面底部，点击“选择专家...”



(8) 选择诊断专家：在选择诊断专家窗口中，根据需要选择相应的专家，后关闭该窗口（点击“X”或者主屏外空白处点击即可关闭）；注：专家姓名前有“√”，表示已选择，再次点击该专家可取消。

最近会诊专家	卫健委疾控中心专家	Motic内部测试专家
	安徽省芜湖市	眼、耳鼻喉病理
	湖北省	妇产科病理, 乳腺病理, 甲状腺病理
	北京市	乳腺病理
	黑龙江省哈尔滨市	纵隔病理, 乳腺病理, 消化系统病理, 胰腺, 肝胆, 呼吸系统病理

(9) 提交病例：在新建病例窗口底部，可以看到已经选择的切片，点击



即可提交病例。



(10) 保存为草稿或者提交专家会诊，返回病例列表，等待专家诊断：保存为草稿则在如下图“未提交”快捷按钮中快速找到；提交按钮可在“待诊断”快捷按钮中快速找到，提交专家诊断；。



(11) 【冰冻病例才有】提交成功后，点击待诊断，进入病例详情页，有个语音提醒功能，点击一下，自动发送语音电话，提醒专家。



(12) 查看报告：

A、点击状态栏的“已诊断”字样或者点击“已诊断”右侧的向下箭头，弹出下拉选择

“查看报告”;



B、点击“病理号”或者“姓名”或者如上图“编辑”选项，进入病例详情页右侧，查看诊断意见和“查看报告”按钮。



(13) 打印报告：在打开的报告中即可查看、打印、另存报告。注：此图标 8 秒后消失，如需找到，请刷新 F5 键或者点击浏览器刷新按钮；或者可以鼠标右击选择打印即可打印报告。

